

Fixum

Tan simple como es posible.



fixum.com.mx



NUESTRA ACADEMIA

Formamos y acompañamos profesionales

Contamos con formación de alto nivel diseñada para odontólogos que desean ampliar sus conocimientos y perfeccionar sus habilidades en implantología. Nuestros programas están cuidadosamente estructurados para ofrecerte una comprensión profunda de las técnicas monofásicas, desde los fundamentos hasta los procedimientos más avanzados.


Contamos con un equipo docente compuesto por profesores expertos y con una sólida trayectoria clínica, que no solo comparten su conocimiento teórico, sino también su experiencia práctica acumulada a lo largo de años en el ejercicio profesional. A través de clases dinámicas, casos clínicos reales y prácticas supervisadas, te guiaremos paso a paso en el dominio de esta técnica innovadora, eficaz y cada vez más demandada en la odontología moderna.

No importa si estás comenzando en el mundo de la implantología o si ya tienes experiencia: nuestros cursos están diseñados para adaptarse a tu nivel y ayudarte a crecer profesionalmente.

¡Potencia tu formación, amplía tu horizonte profesional y lleva tu práctica odontológica al siguiente nivel con nosotros!

1 Características técnicas RA


Código de implante	Ø Cuerpo	Largo	Código de implante	Ø Cuerpo	Largo
RA-3508	3.5	8	RA-5008	5	8
RA-3510	3.5	10	RA-5010	5	10
RA-3511	3.5	11.5	RA-5011	5	11.5
RA-3513	3.5	13	RA-5013	5	13
RA-3515	3.5	15	RA-5015	5	15
RA-4108	4	8			
RA-4110	4	10			
RA-4111	4	11.5			
RA-4113	4	13			

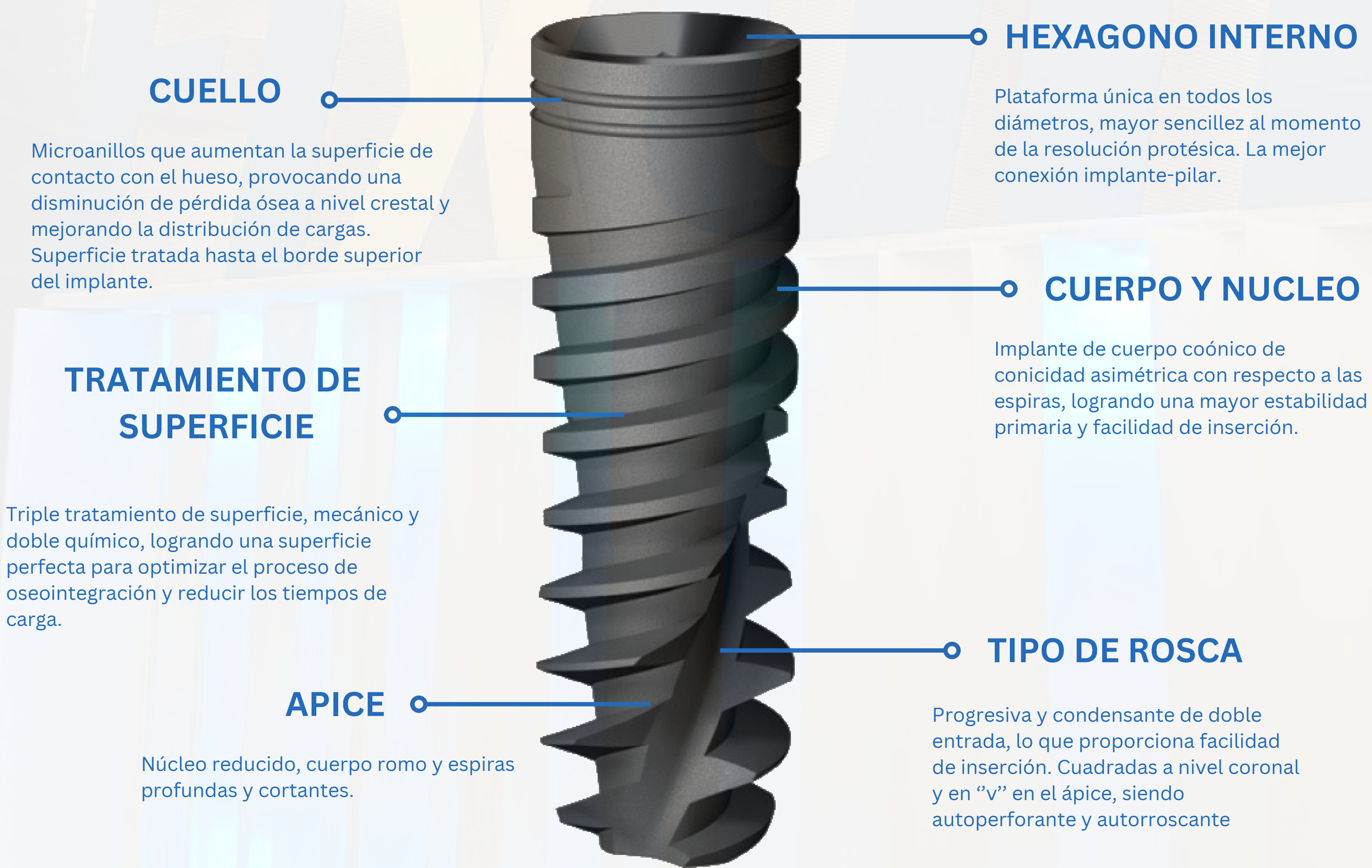

Los implantes FIXUM RA, poseen un hexágono interno con una plataforma única en todos sus diámetros, brindando una facilidad al momento de la resolución protésica. Los microanillos en el cuello del implante aumentan el contacto con el hueso ayudando así a la disminución de pérdida osea a nivel crestal, mejorando la distrubución de las cargas. El cuerpo cónico posee un núcleo con mayor conicidad que las espiras, lo que hace posible una mayor estabilidad primaria y una extraordinaria facilidad de inserción. Nuestros implantes RA, son sometidos a un triple tratamiento de superficie, que consta de un tratamiento mecánico por medio de blastinado con esferas de cerámica de distintos tamaños, logrando así rugosidades más heterogéneas y doble tratamiento químico a diferentes temperaturas, logrando así una superficie que incrementa el contacto hueso-implante optimizando el proceso de oseointegración y logrando reducir los tiempos de carga. La rosca de FIXUM RA, es progresiva y condensante con un diseño de doble entrada que facilita enormemente la inserción, también es autoperforante y autorroscante, en el ápice se convierte en cortante y profunda dando forma de cuerpo romo para no dañar las extructuras anatómicas nobles. El implante FIXUM RA, está diseñado para poder realizar carga inmediata, en hueso blando (tipo III y IV)

2 Características técnicas FIX-PRO

Código de implante	Ø Cuerpo	Largo
IA-3510	3.5	10
IA-3511	3.5	11.5
IA-3513	3.5	13
IA-4010	4	10
IA-4011	4	11.5
IA-4013	4	13

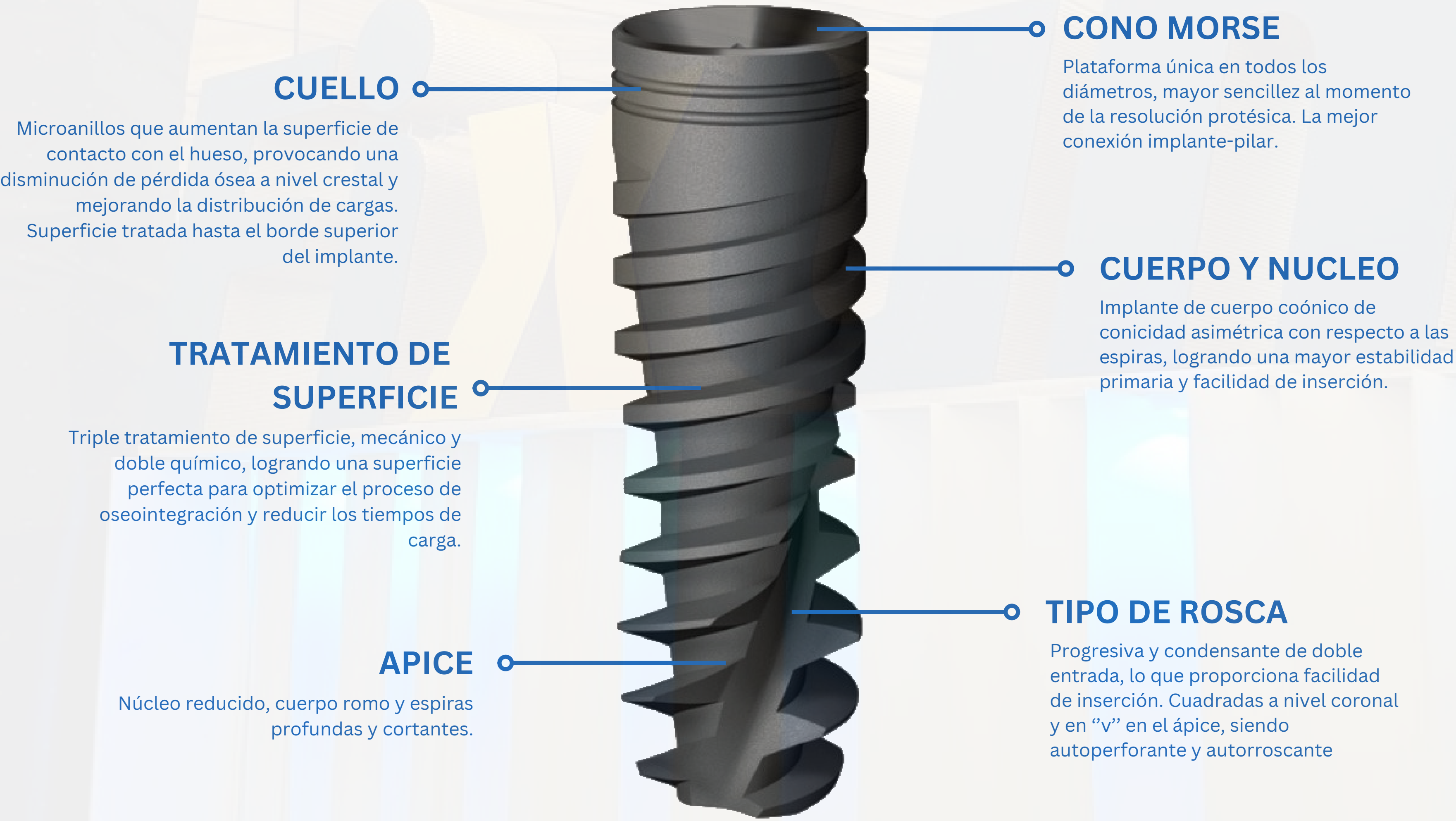


Los implantes FIX PRO, poseen una conexión cono morse con una plataforma única en todos sus diámetros, brindando una facilidad al momento de la resolución protésica. Los microanillos en el cuello del implante aumentan el contacto con el hueso ayudando así a la disminución de pérdida ósea a nivel crestal, mejorando la distribución de las cargas. El cuerpo cónico posee un núcleo con mayor conicidad que las espiras, lo que hace posible una mayor estabilidad primaria y una extraordinaria facilidad de inserción. Nuestros implantes FIX PRO son sometidos a un triple tratamiento de superficie, que consta de un tratamiento mecánico por medio de blastinado con esferas de cerámica de distintos tamaños, logrando así rugosidades más heterogéneas, y un doble tratamiento químico a diferentes temperaturas, logrando así una superficie que incrementa el contacto hueso-implante, optimizando el proceso de oseointegración y reduciendo los tiempos de carga. La rosca de FIX PRO es progresiva y condensante, con un diseño de doble entrada que facilita enormemente la inserción; también es autoperforante y autorroscante, y en el ápice se convierte en cortante y profunda, dando forma de cuerpo romo para no dañar las estructuras anatómicas nobles. El implante FIX PRO está diseñado para poder realizar carga inmediata en hueso blando (tipo III y IV).

3 Características técnicas MEI

Código de implante	Ø Diámetro	Largo	Código de implante	Ø Diámetro	Largo
MAV-3508	3,5	8	MAV-4508	4,5	8
MAV-3510	3,5	10	MAV-4510	4,5	10
MAV-3512	3,5	12	MAV-4512	4,5	12
MAV-3514	3,5	14	MAV-4514	4,5	14
MAV-3516	3,5	16	MAV-4516	4,5	16
MAV-3518	3,5	18			
MAV-3520	3,5	20			

Ventajas Implantes MAV


- Mínimamente invasivo
- Carga inmediata
- Muñón angulable
- Permite bicorticalización
- Osteotomía con una sola fresa
- Amplio uso
- Adecuado para su uso en maxilar superior e inferior
- Titanio 4º que nos proporciona una excelente oseointegración
- Excelente estabilidad primaria

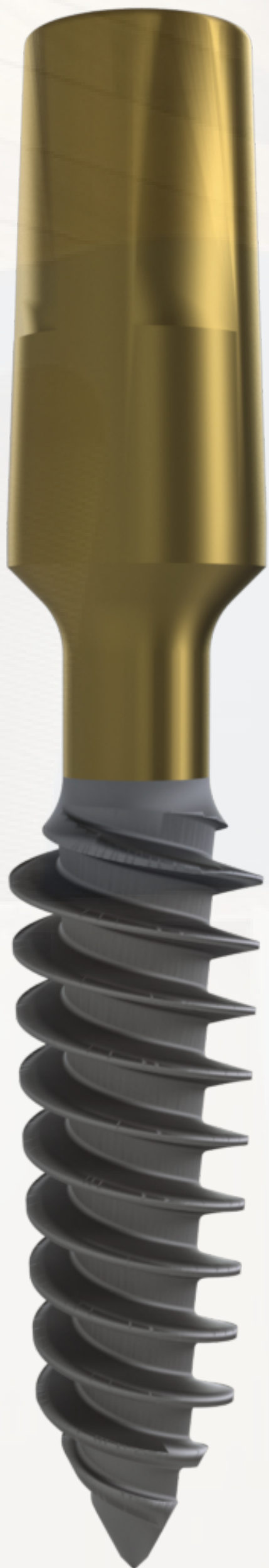

Un implante con características espectaculares. Funciona para máxilares atróficos con carga inmediata y al ser un implante que se puede doblar se adapta al hueso del paciente sin necesidad de injertos óseos. Nuestro implante MAV es recomendado para áreas con baja densidad ósea. Nuestros implantes compresivos, fueron diseñados para evitar la fenestración. Además, el implante tiene una superficie lisa en el cuello que se puede doblar hasta 30 °

Código de implante	Ø Diámetro	Ø Apical	Cuerpo	Cuello	Perfil	Muñón	Largo total
ICC-300701	3	2,1	7	1	1,6	4,5	8
ICC-300703	3	2,1	7	3	1,6	4,5	10
ICC-301003	3	2,1	10	3	1,6	4,5	13
ICC-301006	3	2,1	10	6	1,6	4,5	16
ICC-300109	3	2,1	10	9	1,6	4,5	19
ICC-301012	3	2,1	10	12	1,6	4,5	22
ICC-300114	3	2,1	10	14	1,6	4,5	24

Los implantes dentales Fixum UDirect, son una variante específica de implantes dentales desarrollados por el Dr. Juan Bernardo Calcagno. Estos implantes están diseñados para maximizar la estabilidad primaria y secundaria mediante un diseño específico. La forma de la rosca y el diseño de la superficie están destinados a facilitar la osteointegración y mejorar la estabilidad primaria y a largo plazo del implante. Esta tecnología puede ofrecer ventajas en términos de cirugías no invasivas y cicatrización más rápida. En carga inmediata logra una mayor tasa de éxito en comparación con otros tipos de implantes.

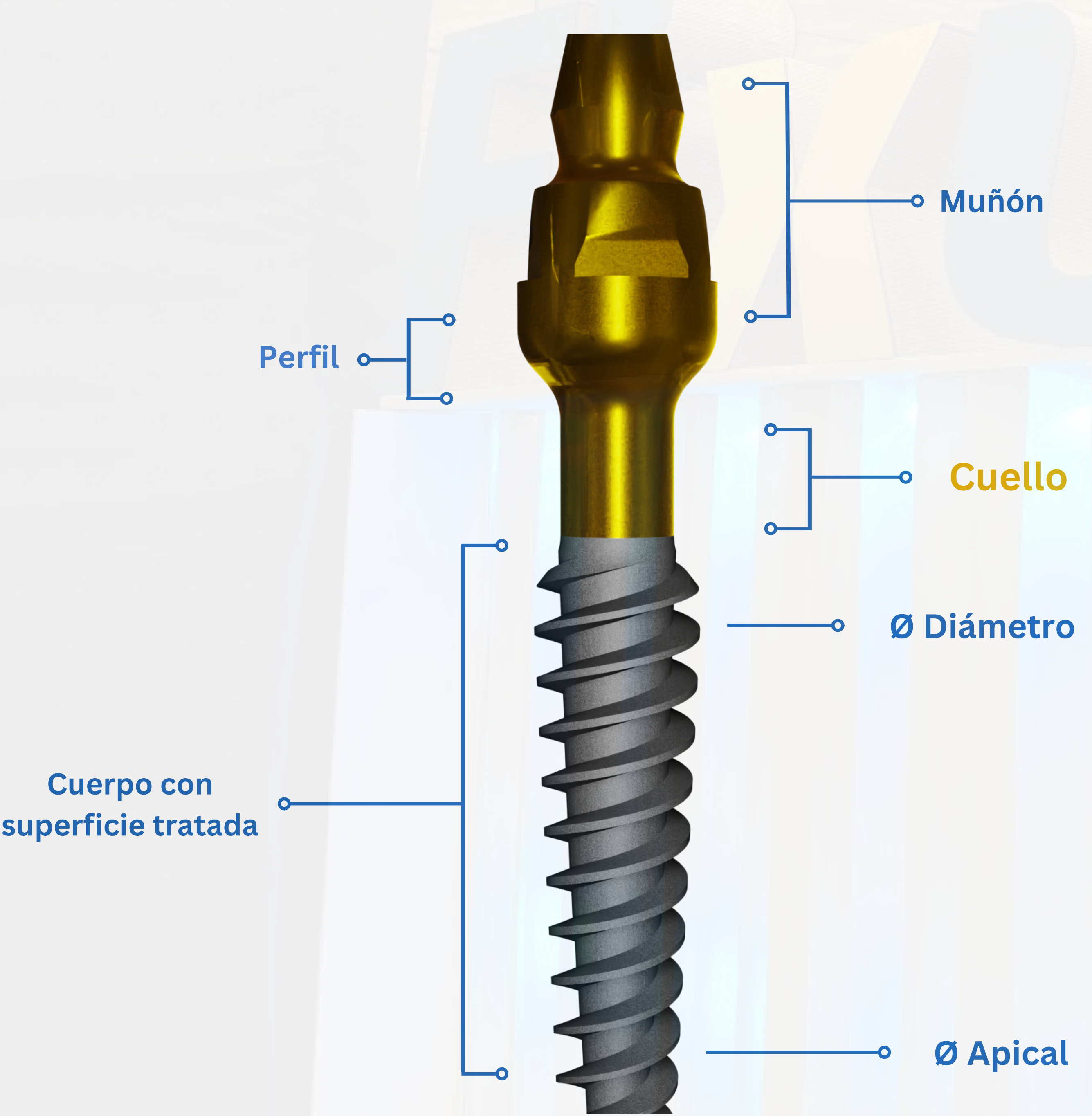

Los implantes dentales monoblock bicorticales son una tecnología avanzada en implantología dental. Estos implantes están diseñados para proporcionar una estabilidad excepcional al fusionarse con el hueso tanto en la parte superior como en la inferior (bicortical), lo que mejora la resistencia y la durabilidad del implante. Esta técnica se utiliza para casos en los que se necesita una mayor fuerza de sujeción, como en pacientes con un hueso menos denso o en situaciones de carga inmediata.


Nuestros implantes UDirect, son sometidos a un triple tratamiento de superficie, que consta de un tratamiento mecánico por medio de blastinado con esferas de cerámica de distintos tamaños, logrando así rugosidades más heterogéneas y doble tratamiento químico a diferentes temperaturas, logrando así una superficie que incrementa el contacto hueso-implante optimizando el proceso de oseointegración y logrando mejor integración a largo plazo.

5 Características técnicas UDirect 2

Código de implante	Ø Diámetro	Cuerpo	Cuello	Perfil	Muñón	Largo total
MA-3510	3.5	10	3	1.5	4.5	13
MA-3513	3,5	13	3	1.5	4.5	16

Fabricado en titanio tipo 2.

El U Direct 2 es un implante diseñado para zonas me mayor volumen óseo. Tiene una porción periimplantaria que favorece la adaptación del anillo de Kolliker

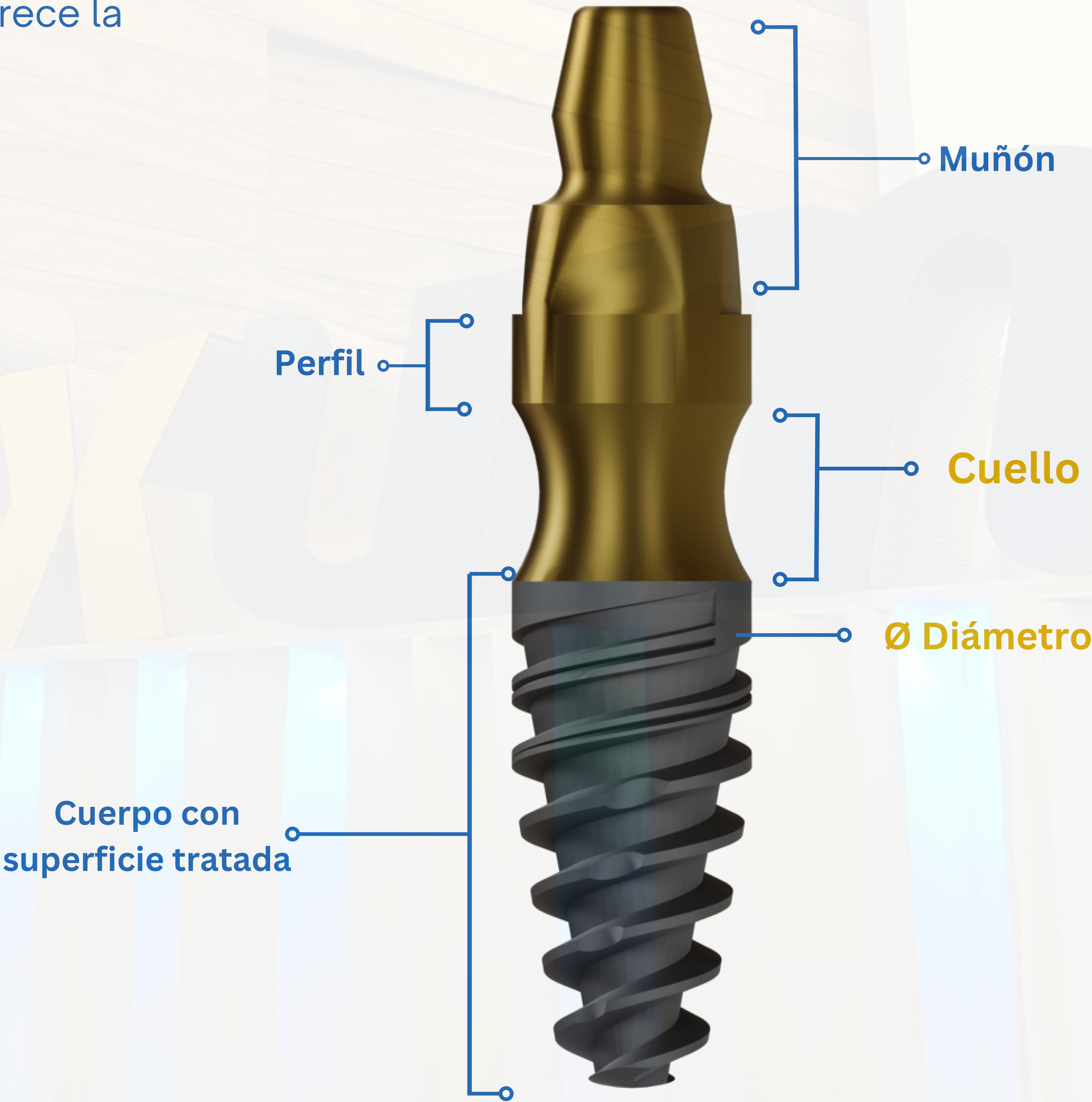

6 Características técnicas BALL

Código de implante	Ø Diámetro	Ø Apical	Cuerpo	Cuello	Perfil	Ø Bola	Largo total
ME-300703	3	2,1	7	3	3	5	10
ME-300705	3	2,1	7	5	3	5	12
ME-301004	3	2,1	10	4	3	5	14
ME-301006	3	2,1	10	6	3	5	16
ME-301008	3	2,1	10	8	3	5	18
ME-301010	3	2,1	10	10	3	5	20
ME-301012	3	2,1	10	12	3	5	22
ME-301014	3	2,1	10	14	3	5	24



Los implantes Ball se colocan al mismo nivel de la encía. Esta conexión al “nivel de la encía” ha demostrado ser la más limpia y beneficiosa para la encía y el hueso. El paciente puede cepillar esta área con un cepillo dental regular. Por esta razón, es un implante sin mal olor. Esta es la ubicación donde la corona o el puente de cerámica se conectan al implante bola.

7 Características técnicas BALL 2


Código de implante	Ø Diámetro	Cuerpo	Cuello	Perfil	Ø Bola	Largo total
ME-350703	3,5	7	3	3	5	10
ME-350705	3,5	7	5	3	5	12
ME-351004	3,5	10	4	3	5	14
ME-351006	3,5	10	6	3	5	16
ME-351008	3,5	10	8	3	5	18
ME-351010	3,5	10	10	3	5	20
ME-351012	3,5	10	12	3	5	22
ME-351014	3,5	10	14	3	5	24




Está pensado para tener las ventajas de ambos mundos: bifásico y MonoBlock. Es un implante que permite doblarse permitiendo entrar en maxilares atróficos y poder usar una prótesis atornillada. Nuestro implante Ball es recomendado para áreas con baja densidad ósea. Perfil de emergencia supernatural. Sistema multiunit que permite usar prótesis atornilladas. Puede ser usado como sistema retentivo en sobre dentaduras. Tipo de rosca sumamente probado que permite alto torque que garantiza una carga inmediata exitosa

Aditamentos e instrumental


1 Aditamentos RA

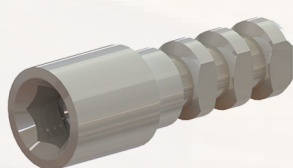


Análogo de implante

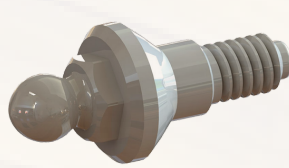


Pilar bola

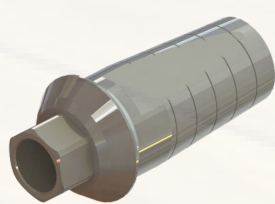


Pilar recto

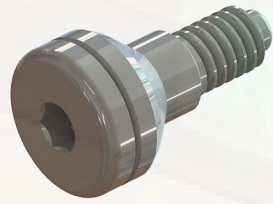

Pilar cicatrizal

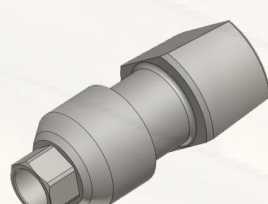

Pilar de transferencia

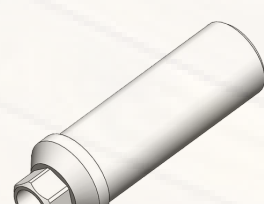

Pilar calcinable
Disponibile CR. CB.




Tornillo de fijación

2 Aditamentos BALL



Tornillo de fijación

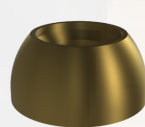


Media bola

3 Aditamentos BALL 2




Tornillo de fijación

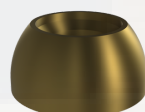

Media bola


4 Instrumental

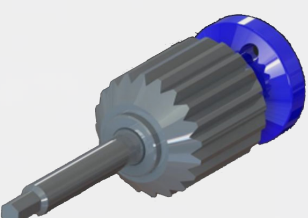

Destornillador manual



Torquímetro

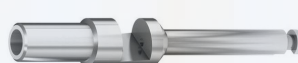

Prolongador de fresa




Extractor de implantes




Fresas



Prolongador de llave

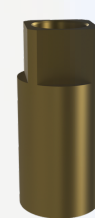

Llave implante BALL

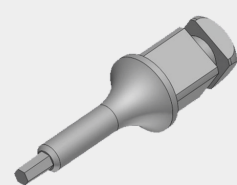

Destornillador de llave

CONTACTO

Contáctanos para más información.



Montecito N38 WTC Col. Nápoles - Piso 4 of. 32 - CDMX



7773274542



contacto@fixum.com.mx



fixum.com.mx